

БЪРЗА ДИАГНОСТИКА
НА СЕКСУАЛНО
ПРЕДАВАНИ
ИНФЕКЦИИ

101
MILLION CASES OF
CHLAMYDIA

248
MILLION CASES OF
TRICHOMONAS

88
MILLION CASES OF
GONORRHEA

11
MILLION CASES OF
SYPHILIS

zeakon
diagnostics

GryphusDiagnostics

K
LABKIT

DIAGNOSTIK NORD
IHR PARTNER FÜR IN VITRO DIAGNOSTIKA

BIOMED

medmira

SEKISUI
DIAGNOSTICS

Immunospark

РИДАКОМ ЕООД

1618 София • ул. Коломан 1, офис 217 • Тел./ факс: 02/ 955 99 98; 958 65 68 • E. Mail: info@ridacom.com



OSOM® Trichomonas Rapid Test

БЪРЗ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА *TRICHOMONAS VAGINALIS* АНТИГЕН:


От вагинален секрет или физиологичен разтвор, приготвен от вагинална натривка.



• ЕДИНСТВЕНИЯТ CLIA - удобен тест за детекция на <i>Trichomoniasis</i>. • Открива антиген, без да изисква жив организъм.	уникален
• Лесни за отчитане, двуцветни резултати. • Съхранение и работа при стайна температура. • Съдържа инструкции за самостоятелно пробовземане.	удобен
• 83% чувствителен спрямо културален метод • 95% съвпадение с микроскопски препарат и култивиране	точен
• Резултат за по-малко от 10 минути.	бърз
• Техническа помощ от сертифицирани медицински технолози. • Online обучение и сертифициране; www.osomtraining.com >>>	достъпен



Инструкции за употреба:

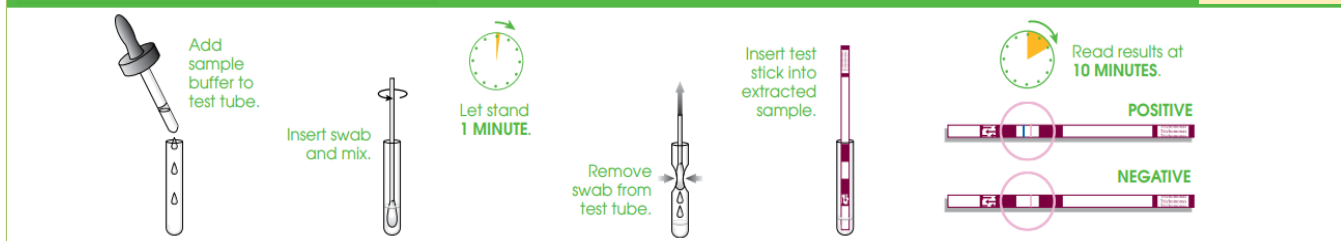

25 теста в опаковка + положителна контрола

РИДАКОМ ЕООД

1618 София • ул. Коломан 1, офис 217 • Тел./ факс: 02/ 955 99 98; 958 65 68 • E. Mail: info@ridacom.com

InPouch™ TV



InPouch™ TV (*Trichomonas vaginalis*)

ТЕСТ СИСТЕМА ЗА ЛЕСНО ОТКРИВАНЕ НА ТРИХОМОНИ:



От уретрален, вагинален секрет или урина



ФУНКЦИОНАЛЕН...


- ...ДИЗАЙН
Компактна, нечуплива опаковка.
- ... И ВИСОКО СПЕЦИФИЧЕН
Предназначен за растежа на *Trichomonas*, чрез инхибиране растежа на дрожди, плесени, бактерии и други типове микрофлора
- СЪВМЕСТИМ С PCR.
Идеален за транспорт и инкубация на пробата

ЛЕСЕН ЗА...

- ...КУЛТИВИРАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
Двата процеса се извършват в едно и също устройство.
- ...УПОТРЕБА
Минимални лабораторни манипулации и оборудване
- ...СЪХРАНЕНИЕ
12 месеца срок на годност, при стайна температура.

СПЕСТЯВА...

- ...ВРЕМЕ
Без предварителна подготовка. Инукулиране на пробата директно в устройството
--> Висока производителност
- ...РАЗХОДИ
InPouch™ TV намалява разхода на лабораторни материали и медицински отпадъци

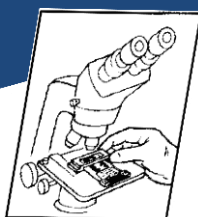

10 броя в
опаковка

Най-точният и надежден тест за клинично доказване на трихомониаза, InPouch™ TV е известен като "златен стандарт" за диагностика. Патентованата среда на InPouch™ е селектирана за транспорта и растежа на *T. vaginalis* и увеличава специфичността, чрез инхибиране на растежа на дрожди, плесени, бактерии и други съпътстващи микрофлората организми. Специално формулираната среда, минимизира възможността от смущения в точността на резултата. Необходими са само няколко жизнеспособни организми - инокулат съдържащ от 1 до 10 организма е достатъчен да доведе до положителен резултат.

Инструкции за употреба:

You Tube: How to use InPouch™

БЪРЗ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ХЛАМИДИИ



Имунохроматогравски, АНТИГЕНЕН тест за качествено откриване на хламидии, от женски ендоцервикален, мъжки уретрален тампон или урина.

Метод на действие:




Бързият имунохроматогравски тест за откриване на антиген от *Chlamydia trachomatis* съдържа мембрана и частици с покритие от специфични за антигена – антитела.

По време на тестването на извлечения разтвор, антиген реагира с антителата

от частиците и в последствие мигрира, за да взаимодейства с антителата върху мембраната, образувайки цветна линия, в тестовата зона. Наличието на такава линия, показва положителен, а отсъствието, отрицателен резултат. Служейки за процедурен контрол, цветна линия се появява винаги в контролната зона, което показва, че пробата е с правилен обем и е извършено мембранното разделяне.

Начин на употреба:

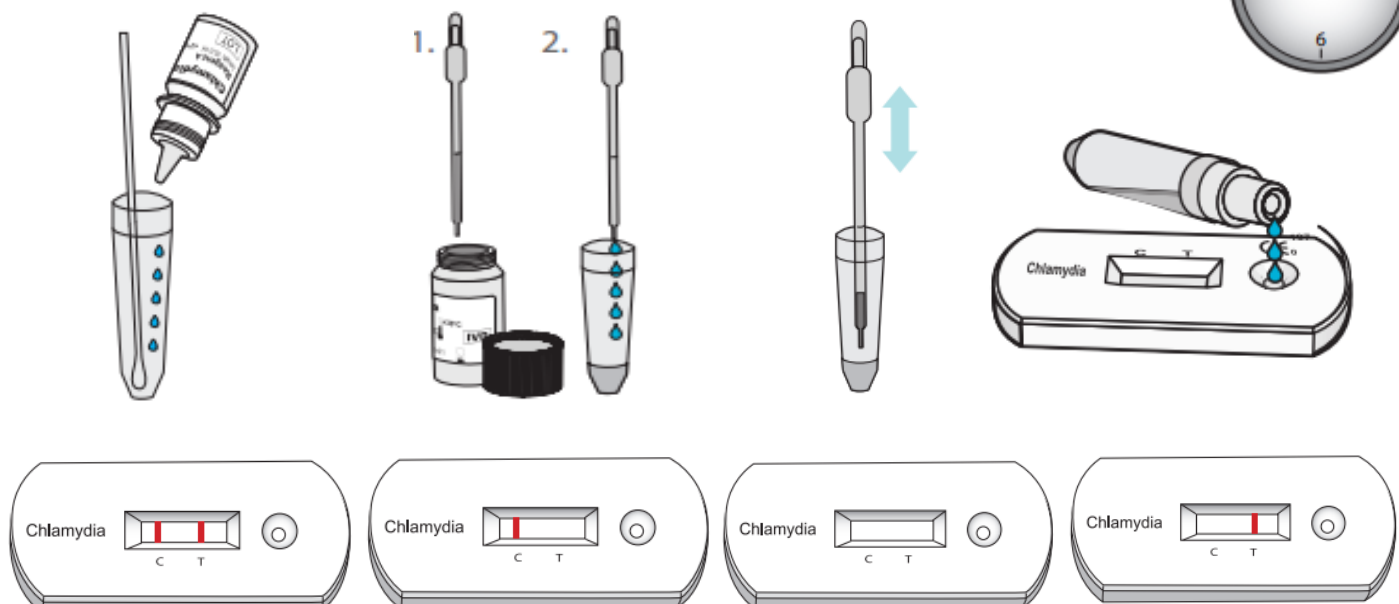

Положителен резултат

Отрицателен резултат

Невалиден резултат

Опаковка: 20 теста, екстрационен разтвор А и екстрационен разтвор Б, пластмасов държач
20 комплекта пипета + пластмасова епруветка



Store at room temperature

InTray™ GC



InTray™ GC (*Neisseria gonorrhoeae*) ТЕСТ СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГОНОРЕЯ:

♀ От уретрален, вагинален секрет или урина ♂



Удобният и практичен InTray™ GC не изисква пробоподготовка, спестявайки Ви време и средства. Инукулацията, както и наблюдението се извършват в едно устройство, намалявайки разходите за лабораторни материали и биологични отпадъци. С този уникален тест, Вашата лаборатория не се нуждае от CO₂ инкубатор.



Високо специфичният InTray™ GC е специално селектиран за растежа на *Neisseria gonorrhoeae*, инхибирайки прорастването на други бактерии, включително: *E. coli*, *S. epidermis*, *P. mirabilis* и *C. albicans*



С уникалната си опаковка InTray™ GC не позволява конденз и замъгляване на прозореца за наблюдение. Също така системата е напълно затворена, което елиминира опасността от замърсяване или загуба на пробата. Още едно предимство, което притежава този компактен продукт, е дълъг срок на годност при съхранение от 2 до 8 °C

Инструкции за употреба:

You Tube:
How to use
InTray™

5 броя в
опаковка



InTray™ GC е оборудван със специално интегрирана таблетка CO₂, съдържаща се в запечатана камера, предотвратяваща разграждането му по време на съхранение. След като камерата е пробита и InTray™ е запечатан отново, таблетката генерира необходимата анаеробна среда - приблизително 7% CO₂, което премахва необходимостта от скъпите инкубатори за CO₂. Системата дава възможност, за едновременно откриване и наблюдение на бактерията, отговорна за полово предаваната инфекция - гонорея


Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test



NEISSERIA GONORRHOEAE ANTIGEN RAPID TEST

БЪРЗ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГОНОРЕЯ АНТИГЕН:

От уретрален, вагинален секрет или урина

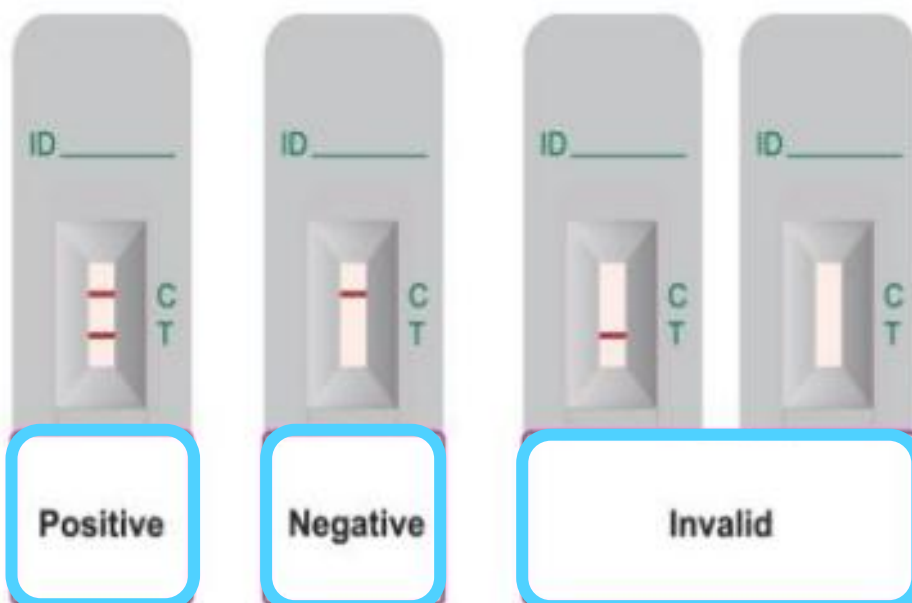

Принцип на действие:

Бързият **антиген** тест е специално разработен да открива бактерията *Neisseria gonorrhoeae* чрез **визуална интерпретация**.

Специфични Гонококови антитела са имобилизирани върху мембрана в тестовата зона.

По време на тестването, пробата реагира с тези антитела, конюгирани с цветни частици.

След това пробата преминава капилярно, взаимодействайки с реагентите на мембраната. Ако са налице достатъчно Гонококови антигени, оцветена лента ще се появи в тестовата зона на мембраната. Наличието ѝ дава положителен резултат, а липсата – отрицателен. Цветната ивица в контролната зона служи за процедурен контрол, което показва, че е поставен правилния обем проба и е извършено мембранното разделяне.

В комплекта са включени: **20** индивидуално опаковани тестови устройства, екстракционен буфер А - 10ml и екстракционен буфер В - 10ml, епруветки за екстракция, две работни станции и инструкция за употреба. Към теста се предлага положителна контрола и отрицателна контрола.



Rapid Syphilis Antibody Test Card




Rapid Syphilis Antibody Test Card

БЪРЗ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ СИФИЛИС:

В кръв, серум или плазма


Какво търсим?: Имуннохроматографският анализ за откриване на антитела срещу *Treponema Pallidum*, се използва като тест за скрининг на инфекцията известна още като сифилис. Серологичният отговор на сифилис включва производство на антитела към широк диапазон от антигени, включително неспецифични и специфични антитела за *T. Pallidum*. Първият откриваем отговор към инфекцията е производството на специфични за *T. Pallidum* антитяло - IgM, което може да бъде установено в рамките на 4 до 7 дни, след появата на бактерията и до края на втората седмица, след инфектирането. IgG се появява около четири седмици по-късно. От момента в който симптоми започват да се изясняват, повечето пациенти имат откриваеми IgG и IgM антитела.

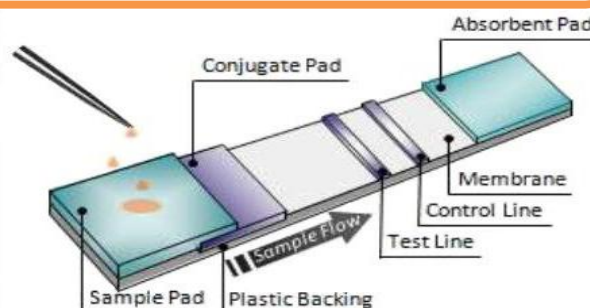


Как го откриваме?: Бързият анти - TP тест, използва хроматографски тест с латерален поток. Устройството е във формата на касета. В нитроцелуозна мембранна лента, са имобилизирани сухи частици колоидно злато, конюгирани рекомбинантни антигени (Au - Ag) и съответстващи на *T. Pallidum* антигени (P47, P45, P17, P15). Те са свързани в тест зона (T), а в контролна зона (C) са свързани заешки антигени.

Когато се добавя проба, тя мигрира чрез капиларна дифузия и рехидратира конюгата.


Ако в пробата присъстват антитела, те ще се заловят с антигените, конюгирани със златните частици, които ще продължат да мигрират по протежение на лентата, достигайки тестовата зона (T), където са заловени и ще генерират видима **червена линия**. Ако в пробата не присъстват такива антитела, в тест зоната (T) няма да се формира червена линия, а конюгата на златото ще продължи да мигрира, до контролна зона (C), където ще реагира със заешкия антиген и ще даде **червена линия**, която отчита валидността на теста.

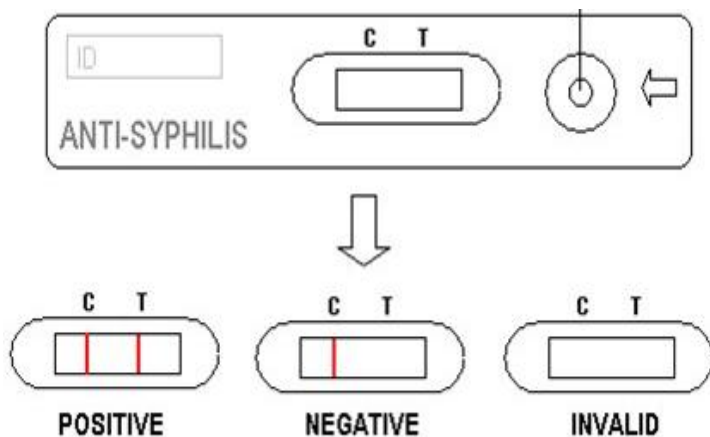

25 броя в
самостоятелни
опаковки

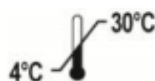

RPR Carbon - Slide agglutination

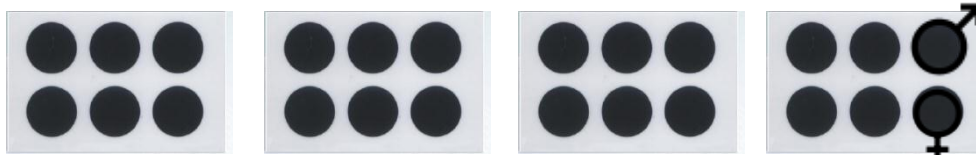

БЪРЗ АГЛУТИНАЦИОНЕН ТЕСТ-ЛАТЕКС ЗА ОТКРИВАНЕ НА PLASMA REAGINS АНТИГЕНИ В СЕРУМ - ДИАГНОСТИКА НА СИФИЛИС

Диагностичен реагент за качествено измерване на Plasma reagents.

Диагностична чувствителност: 86% - първичен

100% - вторичен


Диагностична специфичност : 98%

RPR - carbon: Слайд, аглутинационен тест за качествено откриване на Plasma reagents в човешки серум. Частици покрити с липиден комплекс, се аглутинируют при смесване с проби, съдържащи reagents антигени.

Липиден комплекс: кардиолипин, лецитин и холестерол, във фосфатен буфер 20mmol/L, натриев азид 95gr/L pH 7.0.

Теста включва: положителна и отрицателна контрола (+ / -), плаки, бъркалки и реактиви - готови за употреба

REAGINS: Група антитела срещу някои компоненти на увредени тъкани от пациенти, заразени с Treponema Pallidum, причинител на сифилис. Този микроорганизъм поражда увреждания на черния дроб и сърцето, освобождавайки някои тъканни фрагменти. Иммунната система на пациента реагира, произвеждайки антитела, срещу тези фрагменти.

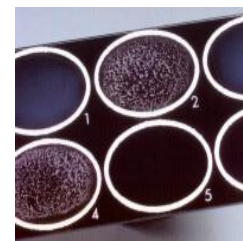

Употреба: Капки от контролите и пробата се поставят в различни части на плаката → Поставя се капка реагент при пробата, която се изследва → Двете капки се смесват и внимателно се разнасят, по цялата повърхност на дадения кръг → Плаката се завърта с механичен ротатор за 8 минути (80-100 оборота в минута) → Оценява се макроскопски наличието или липсата на видими аглутинации, незабавно след свалянето на плаката от ротатора.

CHEMELEX, S.A.
CLINICAL DIAGNOSTIC REAGENTS

125 или
250 теста
в опаковка



TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination) Microplate agglutination



БЪРЗ ХЕМАГЛУТИНИРАЩ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА АНТИТЕЛА СРЕЩУ TREPONEMA PALLIDUM

Диагностично средство за качествено определяне на антитела, от *Treponema Pallidum*.


Диагностична чувствителност: 99,5%

Диагностична специфичност: 100%

Чувствителността на теста е калибрирана, спрямо първия
международен стандарт за Сифилитичен серум - WHO

ТРНА е индиректен хемаглутиниращ тест, за качествено и полуколичествено откриване на специфични антитела, от *T. Pallidum* в човешки серум. Съдържа стабилизирани птичи еритроцити, сенсibiliзирани с антигените, които в присъствието на антитела от *T. Pallidum* се свързват, образувайки

характерни модели:

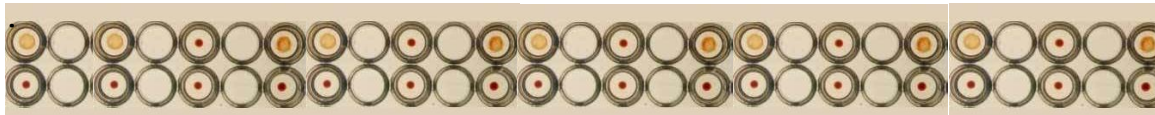

100 теста в опаковка

Реактиви: Тестови клетки: Стабилизирани птичи еритроцити, сенсibiliзирани с антигени на *T. pallidum*, натриев азид 0.95 gr/L pH 7.2

Контролни клетки: Стабилизирани птичи еритроцити, натриеви азид 0.95 gr/L pH 7.2

Разредител: Фосфатен буферен, физиологичен разтвор, pH 7.2, *T. pallidum* (Reiter) екстракт, натриев азид, 0.95 gr/L

Положителна контрола: Имунен човешки серум предварително разреден 1:20. Натриев ази 0,95 gr/L

Отрицателна контрола: Заешки серум, натриев азид, 0.95 gr/L

Метод: Серума се разрежда в съотношение 1:20 с разредител → Прехвърля се с автоматична пипета (75μL) → Микроплаката се разбърква до пълно хомогенизиране → Покритата микроплака се инкубира при стайна температура в продължение на 45-60 минути → Резултата се интерпретира визуално в съответствие с определени критерии.



Solution for urogenital
mycoplasma diagnosis



Идентификационен метод и
тест за резистентност на
УРОГЕНИТАЛНА
МИКОПЛАЗМА

От ендоцервикални и
уретрални проби, урина,
семенна течност и други



Проложение: MycoView тест
китът се използва за
идентификация и
диференциално питруване,
на някои видове
урогенитална микоплазма:
Ureaplasma spp. (*Ureaplasma*
urealyticum & *Ureaplasma*
parvum) и *Mycoplasma*
hominis, от различни
урогенитални проби. Теста
включва и тест за
резистентност към девет
антибиотика.

Принцип: MycoView тестът
се базира на специфичните
метаболични свойства и
резистентност на видовете
микоплазма:

U. urealyticum - Хидролиза на
уреа и резистентност към
линкомицин; *M. hominis*:
Хидролиза на аргинин и
резистентност към
еритромицин. Растежът на
тези два вида се визуализира
чрез промяна в цвета на pH
индикатора от жълто-
оранжево до червено или
розово.

Предимства :

- Всички манипулации в
едно единствено
устройство: 
откриване,
идентифициране,
изброяване +
изпитване за
чувствителност и
резистентност.
- Всички необходими
материали са
предоставени в кита:
пампони за
пробовземане,
транспортна среда,
стерилен парафин и
връхчета за пипети.
- Опция за отчитане
Визуално или с
автоматизиран четец
- Налични
алтернативи за
антибиотични панели:
класически (MycoView)
или CLSI (MycoView
AST)
- Визуализация на
растежа чрез промяна
на цвета.
- Лесно тълкуване.
- Надежден и точен.



Съдържание:	Количество:	Съхранение:
Транспортна среда: печен хранителна среда за транспортиране на урогенитална микоплазма с обем от x 2 мл.	20 виалки	+2/+8 °C
Хранителна среда: съдържа дрождев екстракт, цистеин, субстрати (уреа и аргинин), обогатители, конски серум, селективна антибиотична смес и фенол червено	20 виалки	+2/+8 °C
МусоView стрипове: 2 стрипа с по 12 ямки, затворени в алуминиеви торбички със сушител	10 комплекта	+2/+8 °C
Инкубационна рамка : за 5 стрипа с капачка	1	N/A
Статив: за 10 виалки с хранителна среда	1	N/A
Парафиново масла : 6,5 ml	2	Стайна темп.
Врџхчета за пипета	20	Стайна темп.
Тампони	20	Стайна темп.



Начин на употреба:

1. Инокулира се транспортния булџон T Broth

2. Регенерира се една хранителна среда C medium, с един инокулат T Broth

3. Във всяка от дванайсетте ямки на плаката, се прибавят по 100 µL от регенерираната C medium - хранителна среда

4. Прибавят се по 2 капки парафин във всяка ямка и плаката се инкубира за 24-28 часа при 37°C

5. Разчитане на резултатите

- *U. urealyticum* $\geq 10^4$ CCU /mL susceptible to all antibiotics (except lincomycin).
- *U. urealyticum* $\geq 10^4$ CCU /mL resistant to minocycline and doxycycline.
- *M. hominis* $\geq 10^4$ CCU/mL resistant to roxythromycin and azithromycin.

Diagnosit® BVBLUE®

Rapid Sialidase Test for Bacterial Vaginosis


Since 1998...
Committed
to improving
the health of women
throughout
the world

Бърз тест за диагностика на секрет за бактериални вагинозни инфекции



BVBLUE® е тест за ензимна активност, служещ за откриването на салидазна активност на ензим, произвеждан от бактериални патогени, като *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides spp.*, *Prevotella spp.* и *Mobiluncus spp.*
Тестът BVBLUE® помага на жени, с предполагаема бактериална вагинозна инфекция. Например: жени с вагинално течение, типично за бактериалните инфекции или жени с анамнеза като помощно средство за правилна диагностика на инфекцията.

BVBLUE® е точен: Независимо проучване, оценило BVBLUE® и други методи за откриване на бактериални инфекции в клиничната диагностика на бактериална вагиноза при 840 жени показва:
BVBLUE® VS Wet Mount:
BVBLUE® е по-чувствителен 92,8% > 71,0%
BVBLUE® е по-специфичен 98,0% > 89,5%
BVBLUE® е по-точен 96,4% > 84,6%

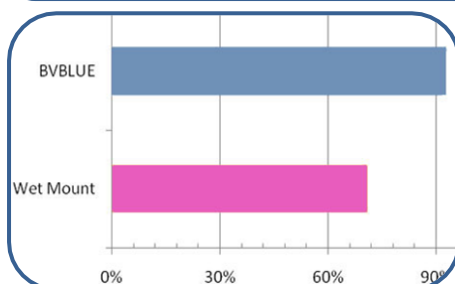

Бързо

- По-малко от 1 минута за работа
- По-малко от 10 минути за получаване на резултат



Сигурно

- CLIA одобрен
- Вътрешен контрол
- Външен контрол на разположение


Удобно

- Контролирано съхранение при стайна температура
- 12-месеца срок на годност

Инструкции за употреба:

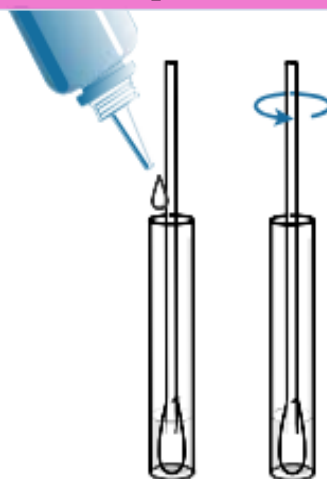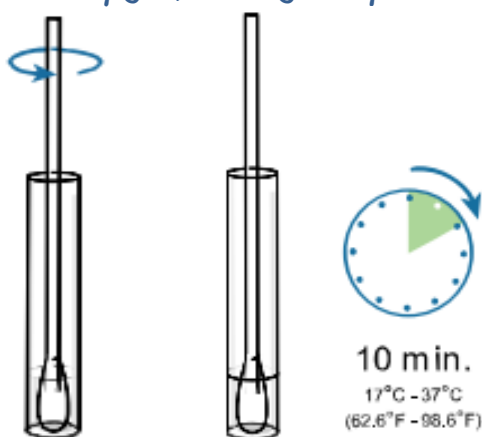

Interpretation of Results

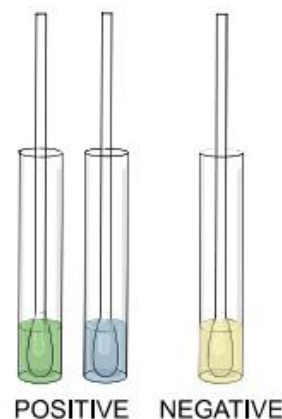




GV Rapid Test

БЪРЗ ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА GARDNERELLA VAGINALIS АНТИГЕНИ

Принципът на теста: Всяка тест карта включва подложка с конюгат, съдържащ колоидно злато в съчетание с *Gardnerella Vaginalis*, секретирани протеини от антитела и нитроцелулозна мембрана, съдържаща тестова линия (Т) и контролна зона (С). Тест лентата е покрита с GV антитела, контролната лента е покрита с вторични антитела за златния конюгат. Когато антигени на пациента навлязат в тестовата зона, Т линията ще се оцвети в бордо. При отсъствието на антигени или ако те са под нивото на детекция, Т линия не се оцветява. Контролната линия винаги трябва да се оцвети, независимо от присъствието на отделен протеин на антиген. Линията С служи като вътрешен качествен контрол на системата за изпитване, показва че необходимото количество от пробата е приложено.

Предоставени материали:

1. 25 тест карти - всяка в индивидуална опаковка
 2. Буфер: 2 x 25 мл / 2 бутилки (25мл) съдържащи: 0,01% Tris-HCl, pH 7.5 NaN₃.
 3. Капкомер: 20 μ L за капка, 25 бр.
 4. Епруветки за проби - 25 бр.
 5. Пипета Пастър: 3 мл. - 1 бр
- Срок на годност: 24 месеца. Съхранявайте при 2-30 °C


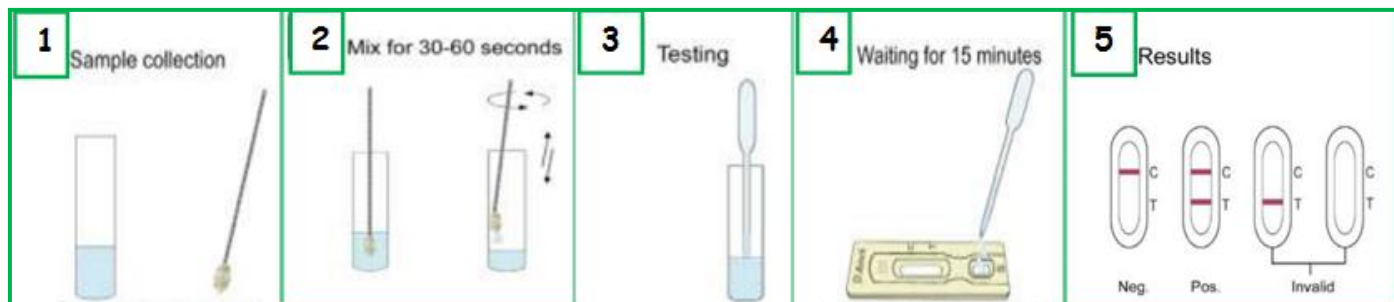


reveal HIV



В три лесни стъпки *Reveal HIV* незабавно открива антитела, срещу HIV-1 и HIV-2, в кръв, серум или плазма. С характеристиките и качествата си, *Reveal HIV* се нарежда на вторият място в света, с чувствителност от 99.8% и специфичност от 99.7%. Този тест е подходящ за широк набор от тестови среди от гледна точка на възможностите на лабораторията. *Reveal HIV* е включен в програми за обществено здраве, доброволно тестване и консултиране, аптеки, лекарски кабинети, имиграционен скрининг и още редица други приложения на този надежден, бърз и удобен метод за диагностика на СПИН

Бърз тест за откриване на ХИВ

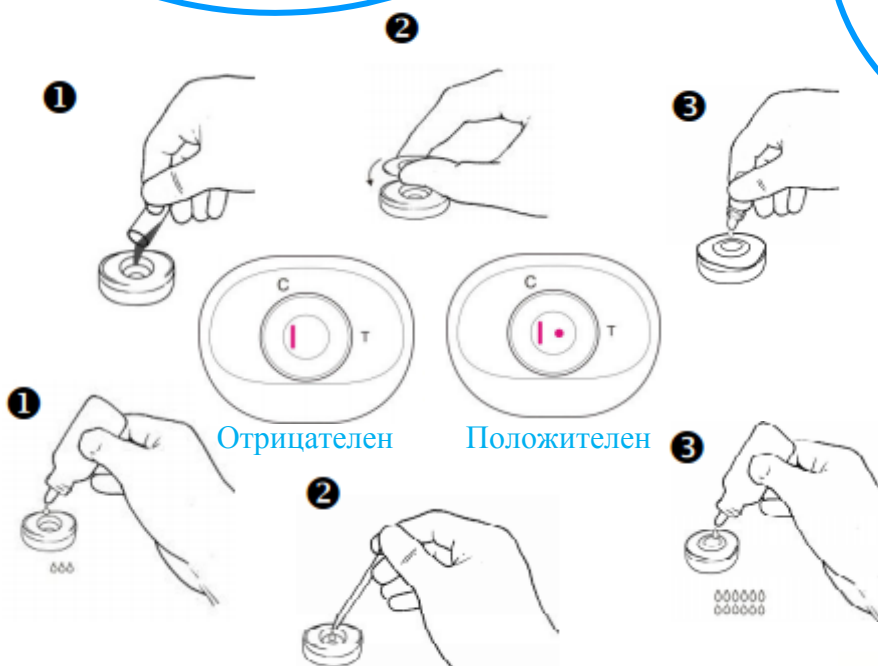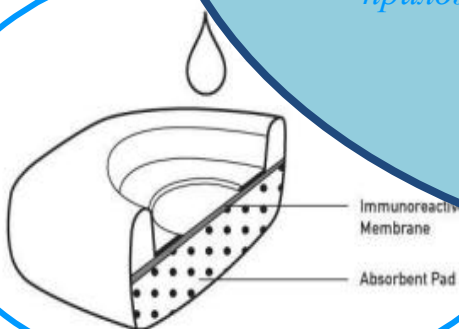

С различните проби извършваме различни, но лесни и бързи манипулации.



medmira
helping people know...*



РИДАКОМ ЕООД

1618 София • ул. Коломан 1, офис 217 • Тел./ факс: 02/ 955 99 98; 958 65 68 • E. Mail: info@ridacom.com

ЦЕНОВА ЛИСТА 2015

OSOM® Trichomonas Rapid Test - 181E

- Цена за тест: 7,90 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 25 теста: 197,50 лв. без ДДС


InPouch TV - 10-2010

- Цена за тест: 7,60 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 10 теста: 76,00 лв. без ДДС


Chlamydia Schnelltest - CLA-K20


- Цена за тест: 3,00 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 20 теста: 60,00 лв. без ДДС


InTray GC (Neisseria gonorrhoeae) - 10-8007

- Цена за тест: 4,60 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 5 теста: 23,00 лв. без ДДС


Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test - RTBA016

- Цена за тест: 7,20 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 25 теста: 180,00 лв. без ДДС

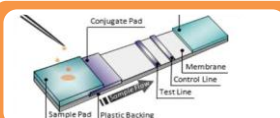
Rapid Syphilis Antibody Test Card - RTBA004

- Цена за тест: 1,12 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 25 теста: 28,00 лв. без ДДС


RPR Carbon - Slide agglutination - 40130

- Цена за тест: 0,128 лв. без ДДС при 250 теста / 0,168 лв. без ДДС при 125 теста
- Цена за опаковка 250/ 125 теста: 32,00/ 21,00 лв. без ДДС


TPHA - Microplate agglutination - 40200

- Цена за тест: 0,52 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 100 теста: 52,00


Mycoview® - 2040

- Цена за тест: 12,00 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 20 теста: 240 лв. без ДДС


Diagnositol® BVblue® - BVB25

- Цена за тест: 3,60 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 25 теста: 90 лв. без ДДС


GV Rapid Test - RTBA028

- Цена за тест: 7,20 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 25 теста: 180 лв. без ДДС


reveal HIV - 0577

- Цена за тест: 5,80 лв. без ДДС
- Цена за опаковка 20 теста: 116,00 лв. без ДДС

RIDACOM

T: +359/2/955 99 98 • E: info@ridacom.com

