

Бърз Ag 2019-nCoV тест за повърхности (R1310/30)



Бърз тест за откриване на SARS-CoV-2 Нуклеокапсиден Протеинов Антиген (NP) в тампони от общи повърхности	Времетраене	Проба	Срок на годност	Съхранение	Формат
	10 минути	Метал, пластмаса, стъкло, хартия, неръждаема стомана	12 месеца	4-30 °C	10/30 теста



Добавете 15 капки от работния буфер в екстракционната епруветка.



Потопете тампона в епруветката и накиснете памучния край.




Вземете отривка от желаната повърхност



Поставете тампона в екстракционната епруветка за 30 секунди. След това извадете тампона и внимателно стиснете стените на епруветката за по-добро извличане.



Добавете 3 капки от екстракционната в тестовата епруветка.

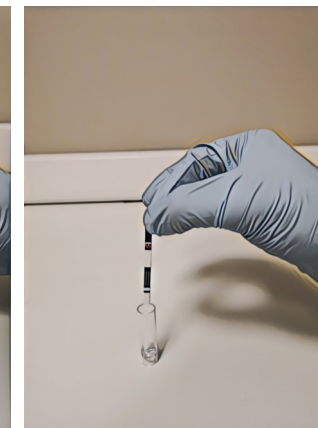

Поставете тест лентата в епруветката като "стрелките" сочат надолу. Отчетете след 10 минути.

Контролна линия
Тест линия



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ:

Контролна линия & Тест линия	Положителен резултат за SARS-CoV-2
Контролна линия & Слаба Тест линия	Положителен резултат за SARS-CoV-2
Само Контролна линия	Негативен резултат за SARS-CoV-2
Само Тестова линия	Индикира невалиден резултат
Не отчита линии	Индикира невалиден резултат